

ALCOVISOR® Mark-X

Használati utasítás


Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Az Alcovisor® Mark X digitális alkoholszonda elektrokémiai érzékelőt használva határozza meg a kilélegzett levegő alkoholkoncentrációját. Bár az Alcovisor® Mark X használata rendkívül egyszerű, nagyon fontos, hogy a készüléket minden esetben a leírtaknak megfelelően használja. Az ettől való eltérés nem feltétlenül érinti a mérés pontosságát, azonban a későbbiekben az eredmények elfogadhatósága is megkérdőjelezhető ha a mérés nem az előírtaknak megfelelően történt.


MEGJEGYZÉSEK

Néhány étel, sőt „alkoholmentes” ital is tartalmazhat nyomokban alkoholt, ami befolyásolhatja a mérés eredményét a szájbán jelenlévő alkohol miatt. Ezt megakadályozandó, – ha lehetséges – várjon kb. 20 percet a méréssel, miután a vizsgálandó személy bármit evett vagy ivott. Ez még gyógyszerre is vonatkozik, ami alkoholt tartalmazhat. Ezen kívül akár egy pohár víz is befolyásolhatja az eredményt, azáltal, hogy lehűti a száj belsejét és felhígítja a nyálát ideiglenesen csökkentve a kilélegzett levegőben az alkohol koncentrációját. A dohányzás és a mérés között legalább 2 percet kell várni.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

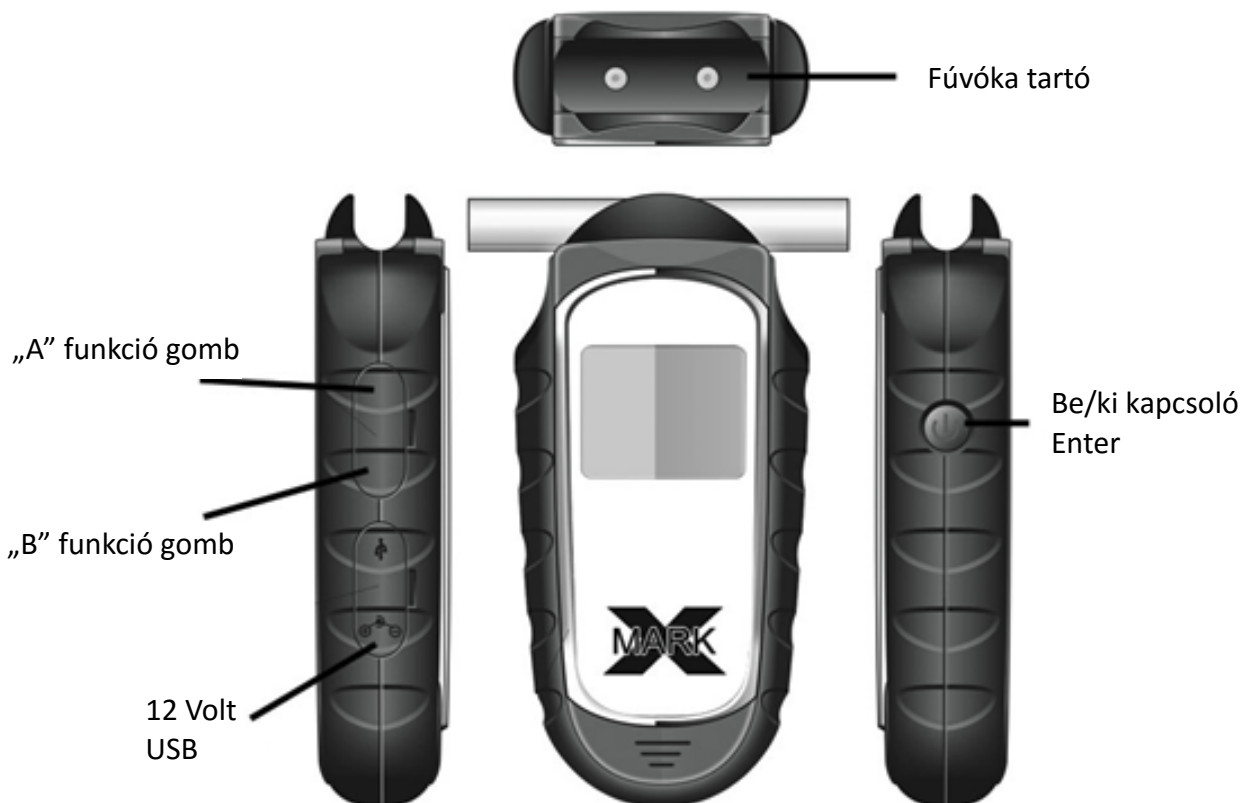

AZ IKONOK MAGYARÁZATA

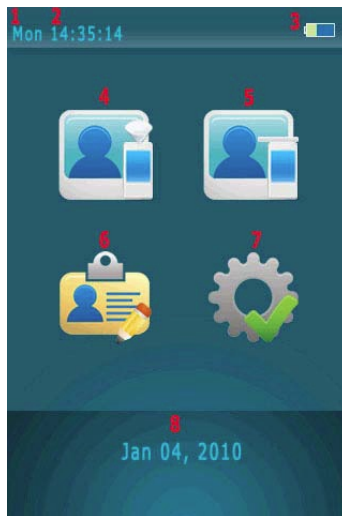

1	A hét napja
2	Pontos idő
3	Elem töltöttség
4	Passzív mérés (tölcsér)
5	Aktív mérés (fúvóka)
6	Mérés eredmények
7	Beállítás
8	Dátum



Előző képernyő/törlés



Következő képernyő/
megerősítés



Nyitó képernyő



Nyomtatás




Mérés megismétlése

A MÉRÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA





Passzív mérés

1. Helyezze a mintavételi tölcsért a készülékre.
2. Válassza ki a passzív mérési módot (screening test) az A ill. B funkció gombbal, majd nyomja meg az Entert.
3. Ha a „Please Blow” (Kérem fújjon) feliratot látja, vegyen egy mély lélegzetet majd fújjon bele a tölcsérbe, amíg a hangjelzést hallja.
4. Eredményképpen „Alcohol Detected” (pozitív – alkohol kimutatható) vagy „No Alcohol” (negatív – alkohol nem kimutatható) felirat jelenik meg a kijelzőn.
5. Manuális mintavételi mód a fújás közbeni „Manual” választásával hajtható végre.
6. Az  ikonnal indíthat újabb mérést.
7. Ha az eredmény pozitív, célszerű egy újabb mérést végezni aktív módban (fúvókával) a pontos érték meghatározása érdekében.

Megjegyzés: passzív módban csak az alkohol jelenléte mutatható ki. Ha pontos értékre van szükség, akkor aktív mérési módot kell választani. A passzív mérés eredményei nem nyomtathatóak és nem tárolhatóak el a memóriában.






Aktív mérés

1. Csatlakoztassa a fúvókát a készülékhez.
2. Válassza az aktív mérési módot az A ill. B funkció gombbal, majd nyomja meg az Entert.
3. Ha „Please Blow” (Kérem fújjon) feliratot látja, vegyen egy mély lélegzetet majd fújjon bele a tölcsérbe, amíg a hangjelzést hallja.
4. A mérés eredménye megjelenik a kijelzőn.
5. Ha nyomtatót is használ, akkor csatlakoztassa a szondához majd kapcsolja be. Miután az eredmény megjelent a képernyőn, nyomja meg a  gombot és nyomtatás automatikusan elindul.
6. A  ikonnal indíthat újabb mérést.
7. Ha a vizsgálandó személy nem fújt 30 másodpercen belül, akkor a vizsgálatot végző kiválaszthatja a képernyőn a „Refuse” (Megtagad) visszajelzést, amivel megerősíti, hogy a mérést megtagadták. Ezen kívül választható a „Test Again” (Újabb mérés) a mérés újbóli elvégzéséhez.
8. Manuális mintavételi mód a fújás közbeni „Manual” választásával hajtható végre.



A mérési eredmények eltárolása

1. A készülék 10 000 mérés eredményét képes eltárolni.
2. A  és  gombokkal lépegethet a mérési eredmények között.
3. Egy eredmény kinyomtatásához csatlakoztassa a nyomtatót, kapcsolja be majd a szondán nyomja meg a  gombot és a nyomtatás automatikusan elindul.




Beállítások


Dátum és idő

1. Állítsa be a pontos időt és a dátumot.
2. Válassza az „Update” (Frissítés) utasítást az értékek rögzítéséhez.

Automatikus kikapcsolás

1. Válassza ki az automatikus kikapcsolás idejét.
2. A  funkcióval rögzítse a kiválasztott értéket.

Nyomtatás

1. Válassza az „Auto Print” (Automatikus nyomtatás) funkciót a mérések utáni automatikus nyomtatás bekapcsolásához.
2. Válassza ki, hogy hány példány kerüljön kinyomtatásra.
3. A  funkcióval rögzítse a kiválasztott értéket.
4. Ha az utolsó kalibráció időpontját is ki akarja nyomtatni válassza a „Cal.”-t.